



Bursch®

There is no substitute for quality

Keine Chance ...

No chance...



... für Zahnstein & Co.

Setzen Sie diamantierte Instrumente ein oder präferieren Sie Instrumente aus Hartmetall für Ihre Prophylaxe- und Parodontalbehandlung?

Wählen Sie aus zehn unterschiedlichen Varianten das für Sie richtige Instrument zum Entfernen von supra- und subgingivalem Zahnstein sowie zum Glätten natürlicher Plaqueretentionsstellen aus.

... for calculus & Co.

Do you use diamond-coated instruments or do you prefer carbide instruments for your prophylactic and periodontal treatments?

From a range of ten different instruments you can choose your preferred instrument for removing supra- and subgingival calculus, as well as for smoothing natural plaque retention points.

Longlife PERIO-PRO

Dia PERIO-PRO

CE 0124


Reinigung und Glättung von Wurzeloberflächen sind wesentlicher Bestandteil der Prophylaxe- und Parodontalbehandlung. Der Patient erwartet am sensiblen Wurzelbereich eine sehr schonende und atraumatische Behandlung. Besonders an schwer zugänglichen Stellen ist mit herkömmlichen Handinstrumenten eine optimale Oberfläche kaum zu erzielen.

Aus diesem Grund wurden die **PERIO-PRO** Instrumenten-Serien entwickelt. Das Indikationsgebiet dieser Instrumente ist weitreichend. Neben der Wurzelreinigung und -glättung, selbst bei beginnender Furkationsbeteiligung, finden die Instrumente auch bei der effektiven Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnstein ihren Einsatz.


Auch lassen sich natürliche Plaqueretentionsstellen wie auch der Wurzelzement bei parodontal geschädigten Zähnen sanft glätten. Die Vorreinigung intraalveolärer Knochentaschen und die Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Einsetzen von festsitzendem Zahnersatz sind weitere Einsatzgebiete dieser vielseitigen Instrumente.

Die schonende Patientenbehandlung steht bei diesen Instrumenten im Vordergrund und wird durch die besondere Konstruktion des Arbeitsteils gewährleistet. Die Arbeitsteilformen berücksichtigen den Übergang von Zahnschmelz zum Zahnwurzelzement und die Makromorphologie der Zahnwurzeln aller Zähne von den Inzisiven bis zu den Molaren. Die abgerundeten Arbeitsteilspitzen vermindern das Verletzungsrisiko der Gingiva bei der geschlossenen Kürettage. Das Arbeitsteil der LongLife PERIO-PRO ist polygonal und hat keine scharfen Schneiden. Die Langlebigkeit des Longlife Perio Pro beruht auf einem Arbeitsteil aus speziellem Feinstkorn-Hartmetall; das Arbeitsteil der Dia PERIO-PRO hat eine feine bzw. eine extra feine Diamantkörnung.

Die PERIO-PRO Instrumente sind unter Beachtung der Herstellerangaben für alle gängigen Desinfektions-, Reinigungs- und Sterilisationsmethoden geeignet.

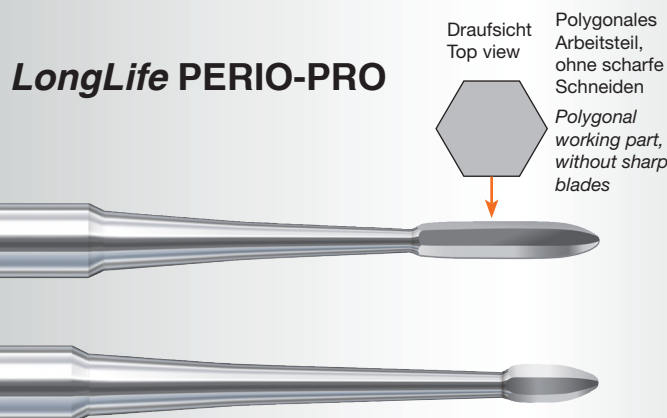

Dia PERIO-PRO

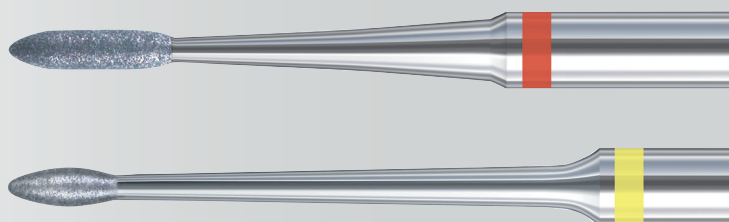

	L					
W/RA						
2						
BUSCH	407	407L	406	406	406L	406L
ISO Ø	012	012	010	012	010	012
L mm	2,9	2,9	5,8	5,8	5,8	5,8

W/RA				
2				
BUSCH	8406LF	8407LF	8406LEF	8407LEF
ISO Ø	012	012	012	012
L mm	5,0	2,9	5,0	2,9

Drehzahlempfehlung/ Recommended speed: **Scaling Einsatz/ Scaling** 12.000 min⁻¹/ r.p.m., **Wurzelglättung/ Root-planing** 8.000 min⁻¹/ r.p.m.

Cleaning and smoothing the root surface is a major element in prophylactic and periodontal treatment. Patients expect particularly gentle and atraumatic treatment of the delicate root area. An optimum surface is difficult to produce with conventional hand instruments, especially in inaccessible places.

This has led to the development of the PERIO-PRO instrument series. These instruments are used for a large range of indications: from cleaning and smoothing the root, even with incipient furcation, to effective removal of supra- and subgingival calculus.

They are also used for gently smoothing natural plaque retention points, as well as the root cementum of teeth with periodontal lesion. These versatile instruments can additionally be used for pre-cleaning intra-alveolar intra bony pockets and for removing surplus cementum after fitting crowns and bridges.

Gentle treatment is the focal aspect of these instruments and is assured by the specially designed working part. The transition from dentine to root cementum and the macromorphology of the roots of all teeth, from incisors to molars, have been taken into account in the shape of the working part in special finest grain carbide; the working part of the Dia PERIO-PRO has got a fine to extra-fine diamond grit.

PERIO-PRO instruments can be disinfected, cleaned and sterilized by all standard methods as directed by the manufacturer.